

Evacuatie ... vanuit het bed

Wat is een Escape-Sheet®?

Personen die hun bed niet zelfstandig kunnen verlaten, moeten bij een noodsituatie geëvacueerd worden met behulp van een evacuatiehulpmiddel. Een van deze hulpmiddelen is een Escape-Sheet®. Een matras waar een Escape-Sheet® onder ligt, is zeer snel om te vormen tot evacuatiematras.

Hoe werkt een Escape-Sheet®?

Bij een noodsituatie worden de sterke veiligheidsbanden onder de matras vandaan gehaald. Deze banden worden dicht gesespt over de patiënt en het beddengoed heen, waardoor de patiënt wordt gefixeerd op de matras. De Escape-Sheet® wordt vervolgens gemakkelijk van het bed af getrokken, samen met de matras en de patiënt, en (indien nodig via de trap) naar een veilige plaats gesleept.

Voordelen Escape-Sheet®:

- Sleepbanden en handvatten uitgevoerd in goed zichtbare groene kleur.
- Extra lange sleepbanden ter vermindering van rugklachten.
- Langere levensduur door betere bescherming van de kunststof gespen in hoesjes.
- Handvatten vergemakkelijken het zijdelings manoeuvreren.
- Static-Control™ (antistatische polyester).
- Verstelbare hoekbanden (geschikt voor elke matrashoogte).
- Premium model voorzien van body-flaps en extra band bij voeteneinde voor eenvoudigere handling.
- Hydro-tec nanotechnologie (waterafstotend).
- CE & TÜV gecertificeerd.

Ons advies:

Zorg ervoor dat ieder bed in uw organisatie is voorzien van een Escape-Sheet®, zodat u altijd bent voorbereid op een optimaal veilige en vlotte evacuatie.






Extra lange sleepkoorden



Verstelbare hoekbanden



Gespen in hoesje

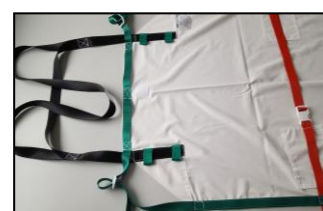

Optie: Banden in 3 kleuren

| Specificaties | Escape-Sheet® Standaard | CE | Escape-Sheet® Premium | CE | Escape-Sheet® maatwerk | CE |
|---|--|----|--|----|--|----|
| Artikelnummer: | 21240 | | 21250 | | 21260 | |
| Afmetingen (lengte x breedte): | ca. 200 x 90 cm | | ca. 200 x 90 cm | | op aanvraag | |
| Materiaal: | 99% Polyester / 1% Static- Control™ | | 99% Polyester / 1% Static- Control™ | | 99% Polyester / 1% Static- Control™ | |
| Maximale draaglast: | 250 kg | | 250 kg | | 250 kg | |
| Gewicht: | ca. 1000 gram | | ca. 1400 gram | | op aanvraag | |
| Kosteloze demonstratie en deskundig advies vooraf: | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Binnen enkele seconden gebruiksklaar: | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Direct evacueren vanaf het bed: | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Industrieel wasbaar op 75° C: | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Hydro-tec nanotechnologie (waterafstotend): | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Hoekbanden in lengte verstelbaar: | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Voor alle matrashoogten: | < 23 cm | | < 23 cm | | ✓ | |
| Uitgevoerd met body-flaps & extra band bij voeteneinde: | - | | ✓ | | op aanvraag | |
| Gespen in hoesje: | ✓ | | - | | op aanvraag | |
| Hitte en brandwerende uitvoering: | Optioneel | | Optioneel | | Optioneel | |
| Banden in 3 verschillende kleuren: | Optioneel | | Optioneel | | Optioneel | |
| Garantie: | 2 jaar | | 2 jaar | | 2 jaar | |



Tussentijdse wijzigingen in technische specificaties, druk- en zetfouten voorbehouden.
 Geproduceerd door Escape Mobility Production & Innovation: TÜV geprüftes Unternehmen.
 Gezondheid gegarandeerd d.m.v. Öko-tex Standard 100

