



Evacuatie ... vanuit het bed

Wat is een Escape-Sheet®?

Personen die hun bed niet zelfstandig kunnen verlaten, moeten bij een noodsituatie geëvacueerd worden met behulp van een evacuatiehulpmiddel. Een van deze hulpmiddelen is een Escape-Sheet®. Een matras waar een Escape-Sheet® onder ligt, is zeer snel om te vormen tot evacuatiematras.

Hoe werkt een Escape-Sheet®?

Bij een noodsituatie worden de sterke veiligheidsbanden onder de matras vandaan gehaald. Deze banden worden dicht gesespt over de patiënt en het beddengoed heen, waardoor de patiënt wordt gefixeerd op de matras. De Escape-Sheet® wordt vervolgens gemakkelijk van het bed af getrokken, samen met de matras en de patiënt, en (indien nodig via de trap) naar een veilige plaats gesleept.

Voordelen Escape-Sheet® HFR:

- HFR uitvoering: beschermend tegen hitte en vlammen (EN ISO 11612).
- Hydro-tec nanotechnologie (waterafstotend).
- Static-Control™ (antistatische polyester).
- Sleepbanden en handvatten uitgevoerd in goed zichtbare groene kleur.
- Extra lange sleepbanden ter vermindering van rugklachten.
- Langere levensduur door betere bescherming van de kunststof gespen in hoesjes.
- Handvatten vergemakkelijken het zijdelings manoeuvreren.
- Verstelbare hoekbanden (geschikt voor elke matrashoogte).
- Premium model voorzien van body-flaps en extra band bij voeteneinde voor eenvoudigere handling.
- TÜV & CE keurmerk.


Ons advies:

Zorg ervoor dat ieder bed in uw organisatie is voorzien van een Escape-Sheet®, zodat u altijd bent voorbereid op een optimaal veilige en vlotte evacuatie.





Model HFR Standard

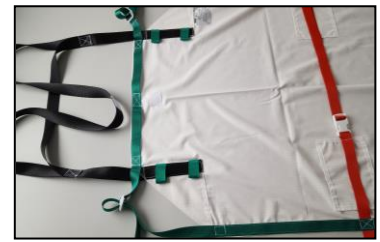

Optie: banden in 3 kleuren



Extra lange sleepkoorden





Verstelbare hoekbanden



Gespen in hoesje



Wasvoorschriften

Specificaties	Escape-Sheet® HFR Standard 	Escape-Sheet® HFR Premium 
Artikelnummer:	21241	21251
Afmetingen (lengte x breedte):	ca. 200 x 90 cm	ca. 200 x 90 cm
Materiaal:	54/45/1% PPAN-fr/lyocell/Static-Control™	54/45/1% PPAN-fr/lyocell/Static-Control™
Maximale draaglast:	200 kg	200 kg
Gewicht:	ca. 1100 gram	ca. 1500 gram
Kosteloze demonstratie en deskundig advies vooraf:	✓	✓
Binnen enkele seconden gebruiksklaar:	✓	✓
Direct evacueren vanaf het bed:	✓	✓
Hitte- en vlam werend (EN ISO 11612):	✓	✓
Industrieel wasbaar op 75° C:	✓	✓
Hydro-tec nanotechnologie (waterafstotend):	✓	✓
Hoekbanden in lengte verstelbaar:	✓	✓
Voor alle matrashoogten:	< 23 cm	< 23 cm
Uitgevoerd met body-flaps & extra band bij voeteinde:	-	✓
Gespen in hoesje:	✓	-
Banden in 3 verschillende kleuren (intuïtievare bediening):	Optioneel	Optioneel
Garantie:	2 jaar	2 jaar



Tussentijdse wijzigingen in technische specificaties, druk- en zetfouten voorbehouden.
 Geproduceerd door Escape Mobility Production & Innovation: TÜV geprüftes Unternehmen.
 Gezondheid gegarandeerd d.m.v. Öko-tex Standard 100

