

Évacuation ... en position assise

Pourquoi une Escape-Chair[®]?

L'Escape-Chair[®] est la solution pour évacuer en toute sécurité des personnes en position assise dans les couloirs ou dans les escaliers.

L'Escape-Chair[®] est facile à utiliser et prête en quelques secondes.

Comment fonctionne une Escape-Chair[®]?

L'Escape-Chair[®] est équipé de courroies de glissement qui freinent la descente sur tous les types d'escaliers bois, béton, etc.

Le freinage est renforcé par le poids de la personne évacuée en combinaison avec la pression qui exercée avec les mains sur la poignée extensible.

Avantages de l'Escape-Chair[®]:

- Idéal pour une évacuation rapide.
- Manipulation par une seule personne.
- Plus besoin de porter les personnes.
- Prêt à l'emploi en quelques secondes.
- Vitesse de descente à définir soi-même.
- Intégration facile dans le flux des évacués.
- Pas d'embouteillage dans les escaliers.
- Convient à votre plan d'évacuation.
- Casette de courroie de glissement fermée.
- Certifié par CE, TÜV et ISO 9001.

Notre conseil:

Ayez toujours une Escape Chair prête à l'emploi pour assurer une évacuation rapide et en toute sécurité.

«La seule chose, plus difficile qu'une bonne préparation à une catastrophe, est d'expliquer pourquoi on ne l'a pas faite»



Modèle ST-B



Modèle ST





Modèle ST-PLUS



Modèle CF



Spécifications	Escape-Chair® ST-B	Escape-Chair® ST	Escape-Chair® ST-PLUS	Escape-Chair® CF
Références :	10010	10020	10030	10040
Dimensions pliée (hauteur x largeur x profondeur) :	102 x 51 x 18 cm	102 x 51 x 18 cm	120 x 51 x 21 cm	120 x 57 x 21 cm
Charge maximale :	185 kg	185 kg	185 kg	185 kg
Angle maximal des escaliers :	40°	40°	40°	40°
Poids :	± 10 kg	± 10 kg	± 11 kg	± 13 kg
Dos ergonomique :	simple	simple	double	double
Démonstration gratuite et le conseil d'un expert à l'avance :	✓	✓	✓	✓
Prêt à l'emploi dans quelques secondes :	✓	✓	✓	✓
Vitesse de descente à définir soi-même :	✓	✓	✓	✓
Cassette de courroie de glissement fermée :	✓	✓	✓	✓
Certifié CE, TÜV & ISO 9001 :	✓	✓	✓	✓
Livraison incl. manuel en 4 langues, DVD d'instruction, pictogramme & crochets de fixation :	✓	✓	✓	✓
Repose-pied :	option	option	option	✓
Accoudoirs :	-	option	option	✓
Appui-tête rembourré :	option	✓	✓	✓
Assise confort :	-	-	✓	✓
Poignée télescopique 2 positions :	-	-	✓	✓
Garantie, excepté pièces d'usure :	6 ans	6 ans	6 ans	6 ans

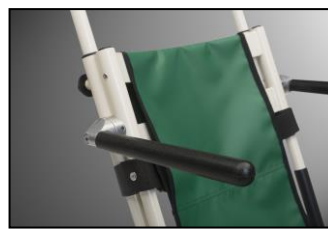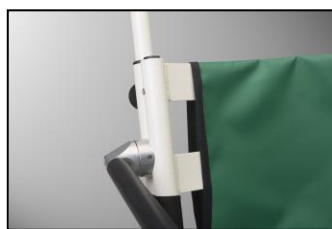

Sous réserve de modifications techniques ou de fautes d'impressions.
Produit par Escape Mobility Production & Innovation: une entreprise certifiée TÜV

