

## Escape-Mattress® Economy Line

# Évacuation ... en position allongée

### Qu'est-ce-qu'une Escape-Mattress® Economy Line?

L'Escape-Mattress® Economy Line est une solution d'évacuation compacte qui permet d'évacuer des personnes non autonomes en position allongée par le sol ou par les escaliers, dans une manière sûre.

### Comment ça fonctionne, une Escape-Mattress® Economy Line?

On met l'évacué sur l'Escape-Mattress® Economy Line avec la tête sur l'appui-tête et les pieds dans le manchon de pied. Après qu'on a fermé les sangles de sécurité, la personne évacuée(e) peut facilement être remorqué vers un endroit sûr en utilisant les sangles de remorquage (opération par deux personnes).

### Avantages Escape-Mattress® Economy Line:

- Sangles de remorquage extra-longues pour réduire les maux de dos de l'évacuateur.
- Avec zip sur le manchon de pied, dans le cas où l'évacué ne peut pas obtenir de façon indépendante les pieds dans le manchon de pied (par exemple en plaître).
- Appui-tête réglable en hauteur.
- Compact et facile à ranger.
- Plus besoin de porter les personnes.
- Prêt à l'emploi dans quelques secondes.
- Évacuation en toute sécurité par les escaliers.
- Vitesse de descente à définir soi-même.
- Intégration facile dans le flux des évacués.
- Convient à tous vos plans d'évacuation.
- Marquage CE & TÜV.

### Notre conseil:

Escape Mobility Company recommande une Escape-Mattress® Economy Line quand il faut évacuer une personne non autonome en position allongée ou en cas d'escaliers en colimaçon.



**ESCAPE MATTRESS**  
ECONOMY LINE

**ESCAPE**  
MOBILITY COMPANY



Housse




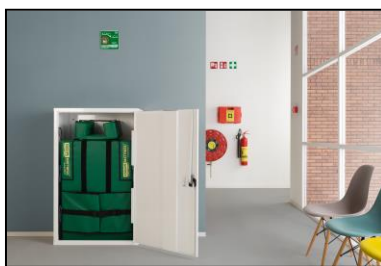
Sangles de remorquage extra-longues



Sangles de sécurité



Specificaties	Escape-Mattress® Economy Line 
Référence :	21040
Dimensions (longueur x largeur x épaisseur) :	± 200 x 65 x 5 cm
Capacité de charge maximale :	150 kg
Poids :	± 4.8 kg housse incluse
Avec manchon de pied et appui-tête réglable en hauteur :	✓
Démonstration et conseil gratuits :	✓
Prêt à l'emploi dans quelques secondes :	✓
Vitesse de descente à définir soi-même :	✓
Peut être plié :	✓
Housse incluse :	✓
Marquage CE & TÜV:	✓
Garantie :	2 ans



Sous réserve de modifications techniques ou de fautes d'impressions.  
Produit par Escape Mobility Production & Innovation: une entreprise certifiée TÜV.

