

## Évacuation ... du lit

### Qu'est-ce-que une Escape-Sheet®?

Les personnes qui ne peuvent pas quitter leur lit indépendamment, doivent être évacuées en cas d'urgence au moyen d'un dispositif d'évacuation. Un de ces outils est une Escape-Sheet®. Un matelas où une Escape-Sheet® se trouve ci-dessous, est très rapide à transformer dans un matelas d'évacuation.

### Comment ça fonctionne, une Escape-Sheet®?

En cas d'urgence, les ceintures de sécurité solides sont retirées du dessous du matelas. Ces bandes sont attachées à travers la literie et le patient, par laquelle il est fixé sur le matelas. L'Escape-Sheet® est alors facilement retiré loin du lit, avec le matelas et le patient, et (si nécessaire par les escaliers) remorqué jusqu'à un endroit sûr.



### Avantages de l'Escape-Sheet®:

- Sangles de remorquage et poignées réalisées dans la couleur verte très visible.
- Les poignées facilitent la manœuvre latérale.
- Sangles de remorquage extra-longues pour réduire les maux de dos de l'évacuateur.
- Durée de vie prolongée grâce à une meilleure protection des boucles plastiques dans des pochettes (sur le modèle Standard).
- Static-Control™ (polyester antistatique).
- Cordes d'angle réglable (convient pour toute hauteur du matelas).
- Hydro-tec, technologie nano (hydrophobes)
- Certificats CE & TÜV.

### Notre conseil:

Assurez-vous que chaque lit dans votre organisation est équipé d'une Escape-Sheet®, de sorte que vous êtes toujours prêt pour une évacuation sûre et lisse optimale.



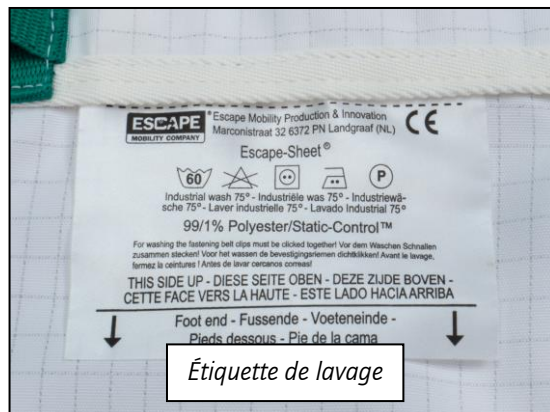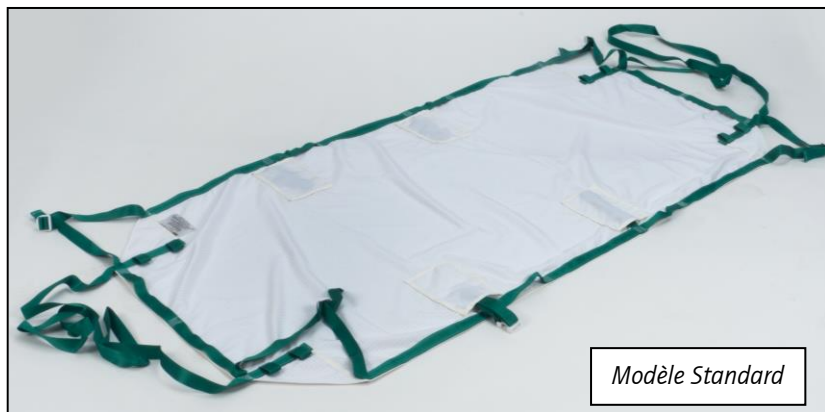


Sangles de remorquage extra-longues





Cordes d'angle réglables:

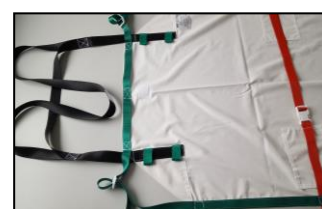

Boucles dans des pochettes



Optionnel: Bandes dans 3 couleurs

Spécifications	Escape-Sheet® Standard 	Escape-Sheet® fait sur mesure 
Références :	21240	21260
Dimensions (longueur x largeur) :	± 200 x 90 cm	sur demande
Matériel :	99% Polyester / 1% Static-Control™	99% Polyester / 1% Static-Control™
Capacité de charge maximale :	250 kg	250 kg
Poids :	± 1000 grammes	sur demande
Démonstration et conseil gratuits :	✓	✓
Prêt à l'emploi en quelques secondes :	✓	✓
Évacuation directe du lit :	✓	✓
Lavage industriel à 75 ° C :	✓	✓
Hydro-tec, technologie nano (hydrophobes) :	✓	✓
Cordes d'angle réglables :	✓	✓
Pour toutes les hauteurs de matelas :	< 23 cm	✓
Boucles dans des pochettes :	✓	sur demande
Version résistant aux flammes (HFR) :	optionnel	optionnel
Bandes dans 3 couleurs différentes (utilisation intuitive) :	optionnel	optionnel
Garantie :	2 ans	2 ans



Sous réserve de modifications techniques ou de fautes d'impressions.  
 Produit par Escape Mobility Production & Innovation: une entreprise certifiée TÜV.  
 Santé garantie au moyen d'Öko-tex Standard 100.

