

Evacuatie ... vanuit het bed

Wat is een Escape-Sheet®?

Personen die hun bed niet zelfstandig kunnen verlaten, moeten bij een noodsituatie geëvacueerd worden met behulp van een evacuatiehulpmiddel. Een van deze hulpmiddelen is een Escape-Sheet®. Een matras waar een Escape-Sheet® onder ligt, is zeer snel om te vormen tot evacuatiematras.

Hoe werkt een Escape-Sheet®?

Bij een noodsituatie worden de sterke veiligheidsbanden onder de matras vandaan gehaald. Deze banden worden dicht gesespt over de patiënt en het beddengoed heen, waardoor de patiënt wordt gefixeerd op de matras. De Escape-Sheet® wordt vervolgens gemakkelijk van het bed af getrokken, samen met de matras en de patiënt, en (indien nodig via de trap) naar een veilige plaats gesleept.

Voordelen Escape-Sheet®:

- Langere levensduur door betere bescherming van de kunststof gespen in hoesjes.
- Handvatten vergemakkelijken het zijdelings manoeuvreren.
- Geschikt voor elke matrashoogte.
- CE gecertificeerd.
- TÜV getest.

Ons advies:

Zorg ervoor dat ieder bed in uw organisatie is voorzien van een Escape-Sheet®, zodat u altijd bent voorbereid op een optimaal veilige en vlotte evacuatie.

A LABEL
QUALITY
EVACUATION
PRODUCT





Model Economy Line



Washing label




Suitable for all mattress heights



Buckles in pockets

Specificaties	Escape-Sheet® Economy Line	CE
Artikelnummer:	21270	
Afmetingen (lengte x breedte):	ca. 200 x 90 cm	
Materiaal:	67% Polyester / 33% katoen	
Maximale draaglast:	200 kg	
Gewicht:	ca. 800 gram	
Kosteloze demonstratie en deskundig advies vooraf:	✓	
Binnen enkele seconden gebruiksklaar:	✓	
Direct evacueren vanaf het bed:	✓	
Industrieel wasbaar op 60° C:	✓	
Voor alle matrashoogten:	✓	
Gespen in hoesje:	✓	
Garantie:	2 jaar	

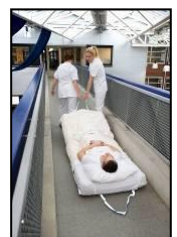

Tussentijdse wijzigingen in technische specificaties, druk- en zetfouten voorbehouden.
Gezondheid gegarandeerd d.m.v. Öko-tex Standard 100

