



## Évacuation ... du lit

### Qu'est-ce-que une Escape-Sheet®?

Les personnes qui ne peuvent pas quitter leur lit indépendamment, doivent être évacuées en cas d'urgence au moyen d'un dispositif d'évacuation. Un de ces outils est une Escape-Sheet®. Un matelas où une Escape-Sheet® se trouve ci-dessous, est très rapide à transformer dans un matelas d'évacuation.

### Comment ça fonctionne, une Escape-Sheet®?

En cas d'urgence, les ceintures de sécurité solides sont retirées du dessous du matelas. Ces bandes sont attachées à travers la literie et le patient, par laquelle il est fixé sur le matelas. L'Escape-Sheet® est alors facilement retiré loin du lit, avec le matelas et le patient, et (si nécessaire par les escaliers) remorqué jusqu'à un endroit sûr.


### Avantages de l'Escape-Sheet® HFR:

- Version HFR: résistant aux chaleur et flammes (EN ISO 11612).
- Hydro-tec, technologie nano (hydrophobes).
- Static-Control™ (polyester antistatique).
- Sangles de remorquage et poignées réalisées dans la couleur verte très visible.
- Les poignées facilitent la manœuvre latérale.
- Sangles de remorquage extra-longues pour réduire les maux de dos de l'évacuateur.
- Durée de vie prolongée grâce à une meilleure protection des boucles plastiques dans des pochettes (sur le modèle Standard).
- Cordes d'angle réglable (convient pour toute hauteur du matelas).
- Marquage CE & TÜV.

### Notre conseil:

Assurez-vous que chaque lit dans votre organisation est équipé d'une Escape-Sheet®, de sorte que vous êtes toujours prêt pour une évacuation sûre et lisse optimale.



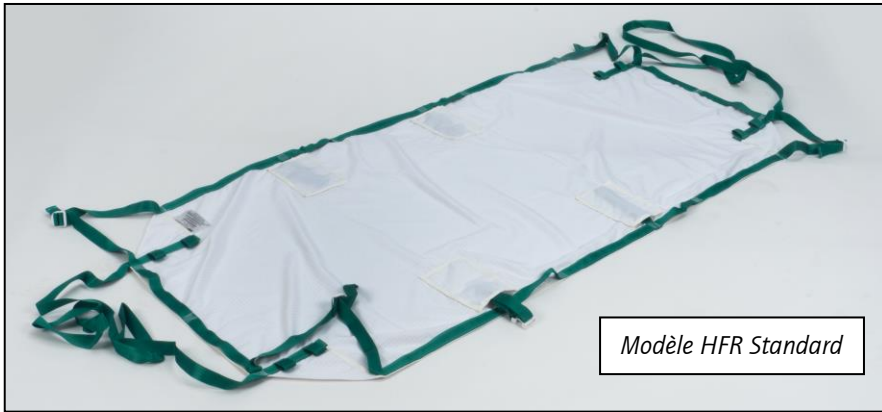

Modèle HFR Standard



Optionnel: Bandes dans 3 couleurs



Sangles de remorquage extra-longues




Cordes d'angle réglables:




Boucles dans des pochettes



Instructions de lavage

Spécifications	Escape-Sheet® HFR Standard 
Références :	21241
Dimensions (longueur x largeur) :	± 200 x 90 cm
Matériel :	54/45/1% PPAN-fr/lyocell/Static-Control™
Capacité de charge maximale :	200 kg
Poids :	± 1100 grammes
Démonstration et conseil gratuits :	✓
Prêt à l'emploi en quelques secondes :	✓
Évacuation directe du lit :	✓
Version résistant aux chaleur et flammes (EN ISO 11612):	✓
Lavage industriel à 75 ° C :	✓
Hydro-tec, technologie nano (hydrophobes) :	✓
Cordes d'angle réglables :	✓
Pour toutes les hauteurs de matelas :	< 23 cm
Boucles dans des pochettes :	✓
Bandes dans 3 couleurs différentes (utilisation intuitive) :	Optionnel
Garantie :	2 ans

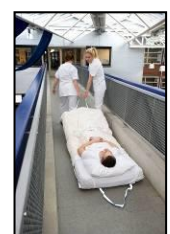

Sous réserve de modifications techniques ou de fautes d'impressions.  
 Produit par Escape Mobility Production & Innovation: une entreprise certifiée TÜV.  
 Santé garantie au moyen d'Öko-tex Standard 100.

